

DETERGENTE PARA EL REPROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE ENDOSCOPIOS

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**DETERGENTE PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.
UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE CON SOLUSCOPE
SERIE 5 Y SERIE XS**

- Detergente monoenzimático
- Eficacia probada contra biopelículas y proteínas
- Conforme a la norma EN ISO 15883-4
- Compatible con una amplia gama de endoscopios flexibles
- Sistema de llave de bloqueo y cánula integrada en el recipiente



SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Detergente para endoscopios flexibles. Utilizar exclusivamente con Soluscope Serie 5 y Serie XS



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

- Tensioactivos no iónicos
- Quelatos
- Proteasa
- Excipientes

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Líquido amarillo claro a ámbar
- Densidad a 20°C: 1,1 g/mL
- Producto de pH puro a 20°C: 10,1* aproximadamente
- pH diluido al 0,5%: 7,5* aproximadamente
- Conductividad al 0,5%: 552 µS/cm

*Mediciones del valor de pH en condiciones de funcionamiento realizadas siempre con un medidor de pH con compensación de temperatura.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	CÓDIGO DE PEDIDO
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3139092

INSTRUCCIONES DE USO


- Enroscar el tapón blanco conectado a su sistema de lavado y desinfección Soluscope al bidón (consultar el manual de uso del sistema de lavado y desinfección)
- Utilizar durante los 2 meses después de la fecha de conexión al sistema de lavado y desinfección (escribir la fecha de apertura en la etiqueta en el emplazamiento previsto para ello)
- Comprobar que el orificio de ventilación no esté bloqueado
- Dilución automática

ALMACENAMIENTO

Advertencia: Respete las precauciones de uso (elaboradas de acuerdo con las normas europeas vigentes sobre la clasificación y el etiquetado de productos químicos).

PRODUCTO SANITARIO USAR DE FORMA SEGURA

Producto Sanitario de Class I. Lea la etiqueta y la información del producto.

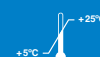

PARA USO PROFESIONAL.


SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA SLU
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
España

ECOLAB®

www.ecolab.com

Soluscope

www.soluscope.com