

Soluscope™ PAA



Desinfectante para el reprocesamiento automatizado de endoscopios

Desinfectante para endoscopios flexibles. Usar exclusivamente en las lavadoras desinfectadoras Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 y Soluscope Serie XS

- Desinfectante a base de ácido peracético
- Actividad antimicrobiana de amplio espectro
- Conforme a la norma EN ISO 15883-4
- Compatible con una amplia gama de endoscopios flexibles
- Sistema de llave de bloqueo y cánula integrada en el recipiente



Soluscope™ PAA

Desinfectante para endoscopios flexibles. Usar exclusivamente en las lavadoras desinfectadoras Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 y Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 4 PA



Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 5

Composición del producto

- Al 5% (p/p) ácido peracético
- Agentes estabilizantes

Características de producto

- Vida útil: 24 meses cerrado
- Aspecto: claro e incoloro
- Olor: característico
- Producto puro con pH: 1 - 4,2*
- Densidad relativa a 20 °C: 1,10 - 1,13
- Índice de refracción: 1,35 - 1,37
- Viscosidad: < 10 mPa/s

*Mediciones del valor de pH en condiciones de funcionamiento realizadas con un medidor de pH con compensación de temperatura.

Propiedades microbiológicas

Condiciones	Concentración	Tiempo de contacto	Temperatura
Soluscope Serie 4 PA (en la WD) y Soluscope Serie 5 (en la WD)			
Bactericida* (EN 13727, EN 14561), Micobactericida* (EN 14348, EN 14563), Fungicida* (EN 13624, EN 14562) & Virucida* (EN 14476, EN 17111)	1,8%	3 mins	40°C
Soluscope Serie XS (en la WD)			
Bactericida* (EN 13727, EN 14561), Micobactericida* (EN 14348, EN 14563), Fungicida* (EN 13624, EN 14562) & Virucida* (EN 14476, EN 17111)	1,0%	6 mins	40°C

Remítase al manual de la lavadora desinfectadora para consultar las condiciones de uso

*=condiciones de limpieza

Información de embalaje y pedido

Producto	Unidad de embalaje	Código de pedido
Soluscope PAA	2 x 5 L	3139052

Instrucciones de uso

Solución concentrada

- Colocar el bidón en su sitio
- Enroscar el tapón gris conectado a su Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 o Soluscope Serie XS al bidón
- Asegurarse de que el orificio de ventilación no esté obstruido
- Ajuste automático de los parámetros de ciclo a través de la Lavadora desinfectadora
- Consultar el manual de instrucciones de la Lavadora desinfectadora

Duración de conservación tras apertura:
2 meses en caso de conexión a la lavadora desinfectadora (escribir la fecha de apertura en el lugar previsto para ello en la etiqueta).


Almacenamiento

Peligroso. Respetar las precauciones de uso (elaboradas de acuerdo con la normativa europea vigente en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).
Almacenamiento: entre +5°C y +25°C.

Producto sanitario usar de forma segura

Clase IIb

Lea la etiqueta y la información del producto.

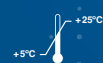

PARA USO PROFESIONAL.



SOLUSCOPE SAS
(an Ecolab Company)
100, Rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Distribuido por:

ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA SLU
Avda. Baix Llobregat, 3-5, 1a
08970 Sant Joan Despí-Barcelona
España

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Soluscope