



SOLUCIÓN LIMPIADORA Y DESINFECTANTE DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS

SURFA'SAFE Premium

SOLUCIÓN DETERGENTE DESINFECTANTE

Solución detergente desinfectante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos.

SURFA'SAFE PREMIUM es un detergente- desinfectante de superficies listo para usar.

Combina un amplio espectro de eficacia, tiempos de contacto cortos y compatibilidad excelente (incluyendo superficies sensibles al alcohol) con las propiedades de un detergente.

Sus características hacen de SURFA' SAFE PREMIUM un producto adecuado para una amplia gama de superficies hospitalarias y un producto ideal para cuidados intensivos y otras áreas de riesgo del hospital.

Esto permite que se pueda utilizar según lo previsto en los protocolos de uso, obteniendo así unos resultados de desinfección y el nivel de cumplimiento obligatorios para una desinfección eficaz restringiendo la propagación de patógenos.

- buenas propiedades espumantes.
- formulado eficientemente sin ingrediente innecesarios (perfume o colorantes).
- limpieza y desinfección en un solo paso, dejando la superficie visiblemente limpia.



SURFA'SAFE Premium

Solución detergente desinfectante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos.

CARACTERÍSTICAS

- Limpia y desinfecta en un solo paso
- No contiene alcohol, ni perfume, ni tinte
- Amplio espectro antimicrobiano y tiempo de contacto óptimo
- Válvula pulverizadora en espuma que evita la formación de aerosoles volátiles
- Su formulación asegura la compatibilidad con un amplio número de materiales incluyendo polímeros (por ej. Policarbonato, plexiglas)
- Espuma densa que mejora la adhesión a la superficie
- pH 6

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

EFICACIA	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida - De conformidad con las normativas: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Levaduricida - De conformidad con las normativas: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberculicida - De conformidad con la normativa EN 14348*	60 min
Efectivo contra virus con envoltura de conformidad con la normativa EN 14476*	1 min
EN 14476* Poliomavirus SV40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Viricida de espectro limitado de conformidad con la normativa EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* condiciones de suciedad

INFORMACIÓN PARA PEDIDO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	3133602

INDICACIÓN

Solución detergente desinfectante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos.

MODO DE EMPLEO

Solución lista para usar.

Pulverizar la solución detergente desinfectante sobre una fibra no tejida y limpiar.

Repartir bien el producto (+/- 6 ml/m² es decir aproximadamente 10 pulverizaciones). Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.

El enjuague solo sirve si las zonas tratadas están destinadas a entrar en contacto con la piel o con las mucosas. Consulte las instrucciones de uso del fabricante para la limpieza y la desinfección de los productos sanitarios.

Para la frecuencia de uso y la limpieza del material de aplicación, consulte el plan de higiene in situ. Expediente científico (eficacia, compatibilidad, etc.) disponible bajo solicitud.

INGREDIENTES

Cloruro de didicildimetilamonio (N^oCAS 7173-51-5: 3 mg/g), Tensioactivos no iónicos, agente secuestrante, excipientes.

CERTIFICADOS


Producto sanitario. El espectro antimicrobiano completo se encuentra en el dossier de producto disponible bajo petición.

ALMACENJE

Almacenar entre +5°C y +25°C.

PRODUCTO SANITARIO. UTILIZAR DE FORMA SEGURA

Lea el etiquetado y la información del producto.

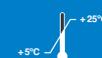

PARA USO ÚNICO PROFESIONAL.



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:

ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.

Avinguda del Baix Llobregat n^os. 3-5
Sant Joan Despí-08970
España

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL[™]